



矯正歯科向けカタログ



Essix® Plastic Sheet



※パッケージは予告なく変更になる場合があります。

■ シートのサイズ表

	厚さ		[四角] 127mm×127mm バキュームマシン用	[丸] 直径125mm バイオスター用	[丸] 直径120mm エルコデント社製用	入数(1箱)
	インチ	mm				
ACE	.030"	0.76	1A350	1A325	1A320	25枚
	.035"	0.88	1AH50	1AH25	1AH20	
	.040"	1.01	1A450	1A425	1A420	
タイプA	.020"	0.50	10025		11021	25枚
	.030"	0.76	10035	11030	11031	
	.040"	1.01	10045	11040	11041	
タイプC	.040"	1.01	1C500	1C125	1C120	25枚

※#11020 プラスチックシート・タイプA .020"バイオスターは、メーカー都合により販売中止中です。

■ 3種類のシートの特徴

	ACE	タイプA	タイプC
	 クリアで、強度抜群! タイプAとタイプCの 優れた特徴を兼ね備えています	 高いコストパフォーマンス! 透明感があり 審美的に優れています	 卓越した強度! 耐摩耗性に優れ壊れにくい
色彩	透明	透明	うすい乳白色
耐摩耗性	★★★★	★★★	★★★★★
耐久月(目安)	18~24ヶ月	6ヶ月	24ヶ月
レジンの接着性	弱	強	なし


■ アクセンチュエーター

適合性を高めるために、アプライアンスの隣接歯間部にアンダーカットをつける場合に使用します。



販売名:アクセントエーター 一般医療機器
 医療機器届出番号:13B2X00008000033
 一般的名称:歯科技工用形成器具

VIMワイヤー

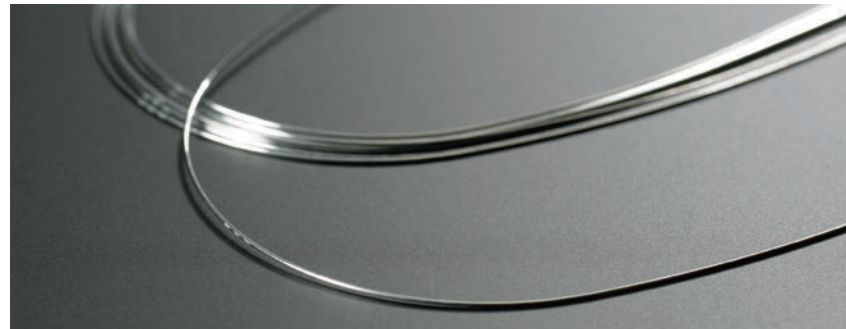

■ VIM専用ワイヤースタンド(9パック収納)



ニッケルチタンワイヤー (NT)

販売名: VIM-NT 医療機器認証番号: 218AKBZX00072000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

スムースアーチフォーム 1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.010"	NT-599	NT-600
	.012"	NT-601	NT-602
	.014"	NT-603	NT-604
	.016"	NT-605	NT-606
	.018"	NT-607	NT-608
	.020"	NT-609	NT-610
	.016"×.016"	NT-651	NT-652
	.016"×.022"	NT-653	NT-654
	.017"×.025"	NT-659	NT-660
	.018"×.018"	NT-661	NT-662
	.018"×.025"	NT-665	NT-666
	.019"×.025"	NT-667	NT-668
.020"×.020"	NT-673	NT-674	

D-バンドワイヤー 1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	NT-901	NT-902
	.016"	NT-903	NT-904
	.018"	NT-905	NT-906

リバースカーブワイヤー 1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.016"	NT-701	NT-702
	.018"	NT-703	NT-704
	.016"×.022"	NT-751	NT-752
	.017"×.025"	NT-753	NT-754
	.019"×.025"	NT-755	NT-756

コバルトクロムワイヤー (CC)

販売名: VIM-CC 医療機器認証番号: 218AKBZX00073000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

ストレートワイヤー(14"/35.56cm) 1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.016"×.016"	CC-151
	.016"×.022"	CC-154

スタンダードアーチフォーム 1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.016"×.016"	CC-551	CC-552
	.016"×.022"	CC-553	CC-554

ステンレススチールワイヤー (SS)

販売名: VIM 医療機器認証番号: 218AKBZX00071000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

ストレートワイヤー(14"/35.56cm) 1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.012"	SS-103
	.014"	SS-104
	.016"	SS-105
	.018"	SS-106
	.014"×.014"	SS-151
	.016"×.016"	SS-152
	.016"×.022"	SS-153
	.017"×.025"	SS-158
	.018"×.025"	SS-161
	.019"×.025"	SS-168

スタンダードアーチフォーム 1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	SS-507	SS-508
	.016"	SS-509	SS-510
	.018"	SS-511	SS-512
	.016"×.016"	SS-553	SS-554
	.016"×.022"	SS-555	SS-556
	.017"×.022"	SS-561	SS-562
	.017"×.025"	SS-563	SS-564
	.018"×.025"	SS-569	SS-570

スムースアーチフォーム 1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	SS-607	SS-608
	.016"	SS-609	SS-610
	.018"	SS-611	SS-612
	.016"×.016"	SS-653	SS-654
	.016"×.022"	SS-655	SS-656
	.017"×.025"	SS-663	SS-664
	.018"×.025"	SS-669	SS-670
	.019"×.025"	SS-673	SS-674

リガチャーワイヤー (LI)

販売名: VIM-LI 医療機器認証番号: 218AKBZX00074000 一般的名称: 歯列矯正用結さつ材 管理医療機器

1パック1,000本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.010"	LI-010

リテーナーブライト

アライナーもリテーナー※も、毎日たった1粒でピカピカに!

※ワイヤー付きリテーナーにも使用可

しつこい汚れに強く、除菌効果のある歯科用器具洗浄タブレット。アライナーもリテーナーも15分ほどで元の輝くような美しさよみがえらせ、さわやかな香りとともにその透明度や清潔さを維持できます。



- タブレットタイプだから計量いらずで簡単
- 粉末が洗面台にこぼれることがなくて衛生的
- 1日1回1粒! わずか15分で洗浄可能

※それ以上の長い時間は水に浸さないでください。装置の劣化や、ソフトタイプでは着色および変形の可能性があります。

※パッケージは予告なく変更になる場合があります。



■ リテーナーブライト(標準サイズ)

■ リテーナーブライト(大箱サイズ)

オーソストリップス



患者さんにやさしいストリッピングが、
“ラクに”“安全に”できます！

コントラ使用で
スピーディーに
削合・研磨

安全で歯肉を
傷つけにくい

ブレードが
しなるので
形態修正も簡単

※前後運動式コントラに装着してご使用ください。
※過度の齧生によりコンタクトポイントがない場合は、まずは手用ストリップスで空隙をつくります。
その後でオーソストリップスを使えば、スムーズにストリッピングできます。

推奨コントラ
(2018.9現在)

Kavo社製A.ヘッドとB.シャンク
を組み合わせてご使用ください。

A.ヘッド : ①L61G EVA(ロック機能なし) ②L61R EVA(ロック機能付き)
B.シャンク: ①LUX 20L(等速1:1) ②LUX M07L(減速2.7:1) ③LUX M29L(減速7.4:1)

※上記コントラについてのお問い合わせは、各ディーラー様へお願いします。


■オーソストリップス サイズ表

※オートクレープ滅菌可能

粒子粗さ	80µm	60µm	40µm	25µm	15µm	8µm
カラーコード	ブルー	ブラウン	レッド	ホワイト	イエロー	オレンジ
用途	●多量の削合、形態修正	●少量の削合、形態修正 ●コンタクトスペースが少しある 場合の初期削合	●少量の削合、歯面研磨としての 形態修正	●フィニッシャー。IPR処置で縮小 後に輪郭削りを仕上げるため ●わずかな縮小(各歯面あたり0.05mm) にも対応可能	●ポリッシャー。IPR処置での輪郭 削りもしくは、縮小後の隣接歯 面研磨用	●オープナー。IPR処置で縮小を 始める前に、歯と歯の間の緊密 なコンタクトポイントを開くため
両刃(3本入)	OS80	OS60	OS40	OS25	OS15	OS08
販売価格	3本入					
片刃 (3本入)	R	OS60R	OS40R	OS25R	OS15R	—
	L	OS60L	OS40L	OS25L	OS15L	—
販売価格	3本入					

■両刃6本入りセット

80µm・60µm・40µm・25µm・15µm・8µm 各1本入り

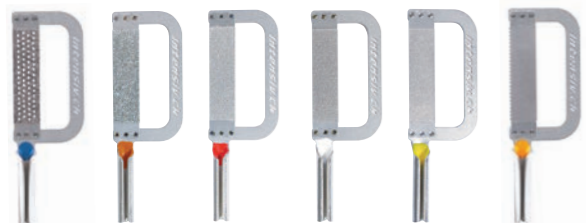

オーソストリップス・セントラル



歯面の研磨・仕上げに！

ダイヤモンドコーティングされた中央部だけがヤスリ状になっていて、隣接面エナメル質を削れるようになっています。

エナメル質の削り過ぎを防ぐ

周辺組織を傷つけにくい

切削中の段差(ステップ)ができにくい

■オーソストリップス・セントラル サイズ表

※オートクレープ滅菌可能

粒子粗さ	60µm	40µm	25µm	15µm
カラーコード	ブラウン	レッド	ホワイト	イエロー
用途	●少量の削合、形態修正 ●コンタクトスペースが少しある場合の初期削合	●少量の削合、歯面研磨としての形態修正	●フィニッシャー。IPR処置で縮小後に輪郭削り を仕上げるため ●コンタクトスペースが少しある場合の初期削合	●ポリッシャー。IPR処置での輪郭削りもしくは、 縮小後の隣接歯面研磨用
両刃(3本入)	OS60C	OS40M	OS25F	OS15POL
販売価格	3本入			



TEL 0120-500-418 ヨイハ **FAX** 0120-500-518 イイハ
Free Dial Free Dial

<https://www.oralcare.co.jp>

株式会社オーラルケア 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9